



LILLY KWIKPEN™ GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

Lilly KwikPen™ onderdelen

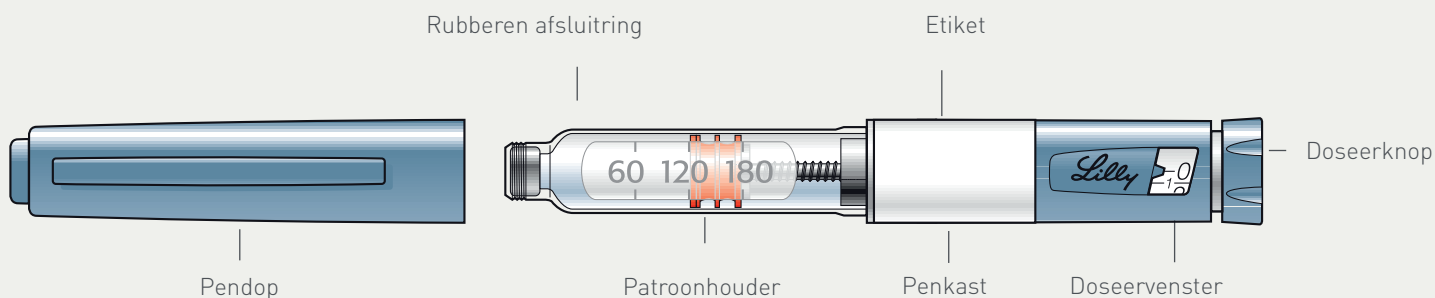


Naald Onderdelen:

(Naaldjes niet bijgeleverd)

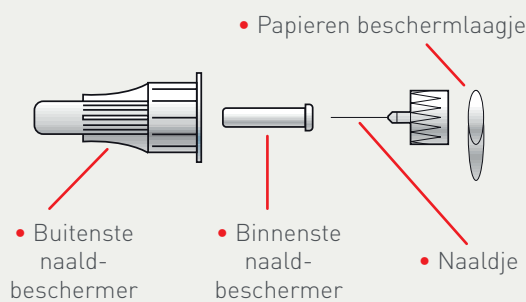

Een Lilly KwikPen™ voorbereiden voor gebruik

1. Trek aan de pendop om deze te verwijderen.

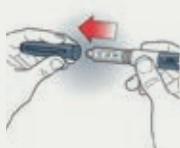


Wees er zeker van dat u uw insuline

- checkt op:
- Type
 - Verval datum
 - Uiterlijke verschijning

2. Alleen voor troebele insuline:



Rol de pen voorzichtig 10 keer en draai de pen 10 keer op en neer. De insuline moet gelijkmatig gemengd zijn.

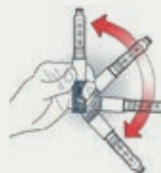

3. Verwijder de papieren beschermlaag van de buitenste naaldbeschermer.




4. Zet het beveiligde naaldje recht op de pen en draai deze goed vast.



Uw pen ontlichten (vóór elke injectie)

1. Haal de buitenste naaldbeschermer eraf.

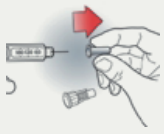

Gooi deze niet weg.

Haal de binnenste naaldbeschermer eraf en gooi deze weg.

2. Stel 2 eenheden in door de doseerknop te draaien.




+

3. Houd de pen recht op.




Tik voorzichtig tegen de patroonhouder om de luchtbellen bovenin te verzamelen.

4. Druk, met de naald omhoog gericht, de doseerknop in totdat deze stopt en een 0 te zien is in het doseervenster. Houd de doseerknop ingedrukt en **tel langzaam tot 5**. Het ontlichten is voltooid wanneer er een stroompje insuline uit de punt van het naaldje komt. Als er geen stroompje insuline uit het naaldje komt, herhaal dan de ontlichtingsstappen 2 t/m 4.

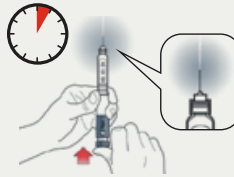


Dosis injecteren


1. Draai de doseerknop tot het aantal eenheden dat u moet injecteren. Als u teveel eenheden draait, kunt u dit corrigeren door terug te draaien. De oneven nummers worden aangeduid als strepen tussen de even nummers.

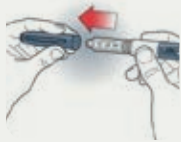

Voorbeeld:
10 eenheden..

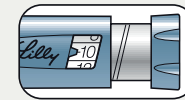

Voorbeeld:
15 eenheden.

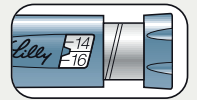


2. Steek het naaldje in de huid met de aanbevolen techniek van uw zorgverlener.



Plaats uw duim op de doseerknop en druk stevig totdat de doseerknop niet meer beweegt.

- Houd de doseerknop ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis te krijgen.

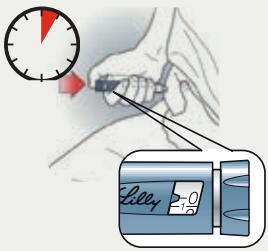

Opmerking: Controleer of u een 0 in het doseervenster ziet om zeker te zijn dat u uw volledige dosis heeft gekregen.

Opmerking: U kunt niet meer eenheden instellen dan dat er nog in de pen zit. Als u meer eenheden wilt injecteren dan nog in de pen zit, kunt u de hoeveelheid die achter is gebleven in de pen gebruiken. Vervolgens kunt u met een nieuwe pen de dosis compleet maken.

3. Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer terug.



Opmerking: Bewaar de pen niet met het naaldje erop, dit om lucht-bellen in de patroon te voorkomen.

4. Draai de beveiligde naald eraf en gooi deze weg en volg de lokale voorschriften voor het weggooien van gebruikte naaldjes.



Zet de pendop terug.



Lilly